



Výškové polohování

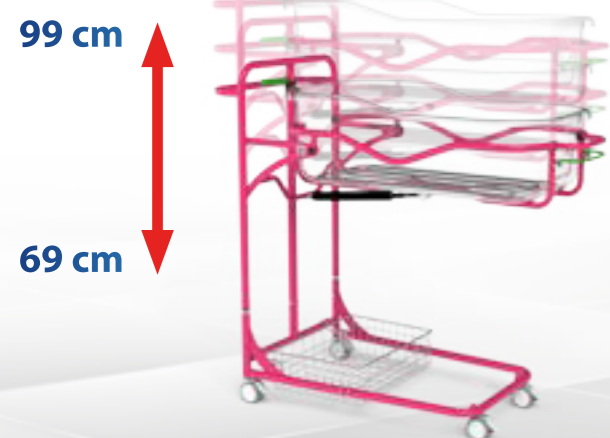

Naklápění vaničky

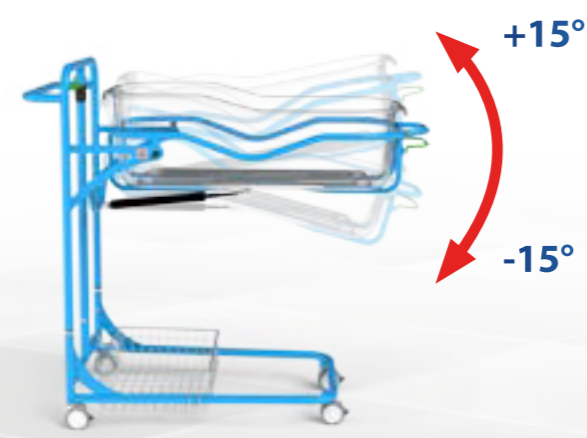

MADLO PRO SNADNOU MANIPULACI

Pro snadnou manipulaci a bezpečné přesouvání je postýlka vybavena manipulačním madlem.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ

Možnost volby základní verze postýlky bez výškového nastavení nebo vyšší verze, která umožňuje snadné nastavení výšky pomocí ručního ovládání. Vanička je během nastavování nadlehčována plynovou pistnicí, takže samotné nastavení výšky nepřináší žádnou fyzickou námahu.

INTELIGENTNÍ KONSTRUKCE

Díky široké škále polohování včetně výškového nastavení je možné s postýlkou zajet nad většinu běžných lůžek. Maminka tak může být vždy v nejbližším kontaktu se svým miminkem.

ODNÍMATELNÁ TRANSPARENTNÍ VANIČKA

Plastová vanička je vyrobena ze zdravotně nezávadného PET materiálu, který je běžně využíván v potravinářském průmyslu. Materiál plně odpovídá nejvyšším požadavkům a standardům pro použití v kontaktu s nejmenšími dětmi. Ve spodní části vaničky jsou vytvořeny otvory, které zajišťují optimální cirkulaci vzduchu pod matrací. Vaničku lze snadno vyjmout vytažením z konstrukce postýlky.

ODNÍMATELNÝ KOŠÍK

Ve spodní části postýlky může být umístěn odkládací košík pro věci nezbytné při péči o miminko.

KOLEČKA


Brzditelná kolečka umožňují snadné převážení postýlky a bezpečnou manipulaci. Standardní kolečka lze na přání nahradit za veselá s motivy zvířátek.

NAKLÁPĚNÍ VANIČKY

Optimální polohu pro miminko můžete jednoduše nastavit naklápěním vaničky jednou rukou za pomoci plynové pozice.

KAPSA NA JMENOVKU


Jmenovku miminka můžete jednoduše umístit do průhledné kapsy v čele vaničky.

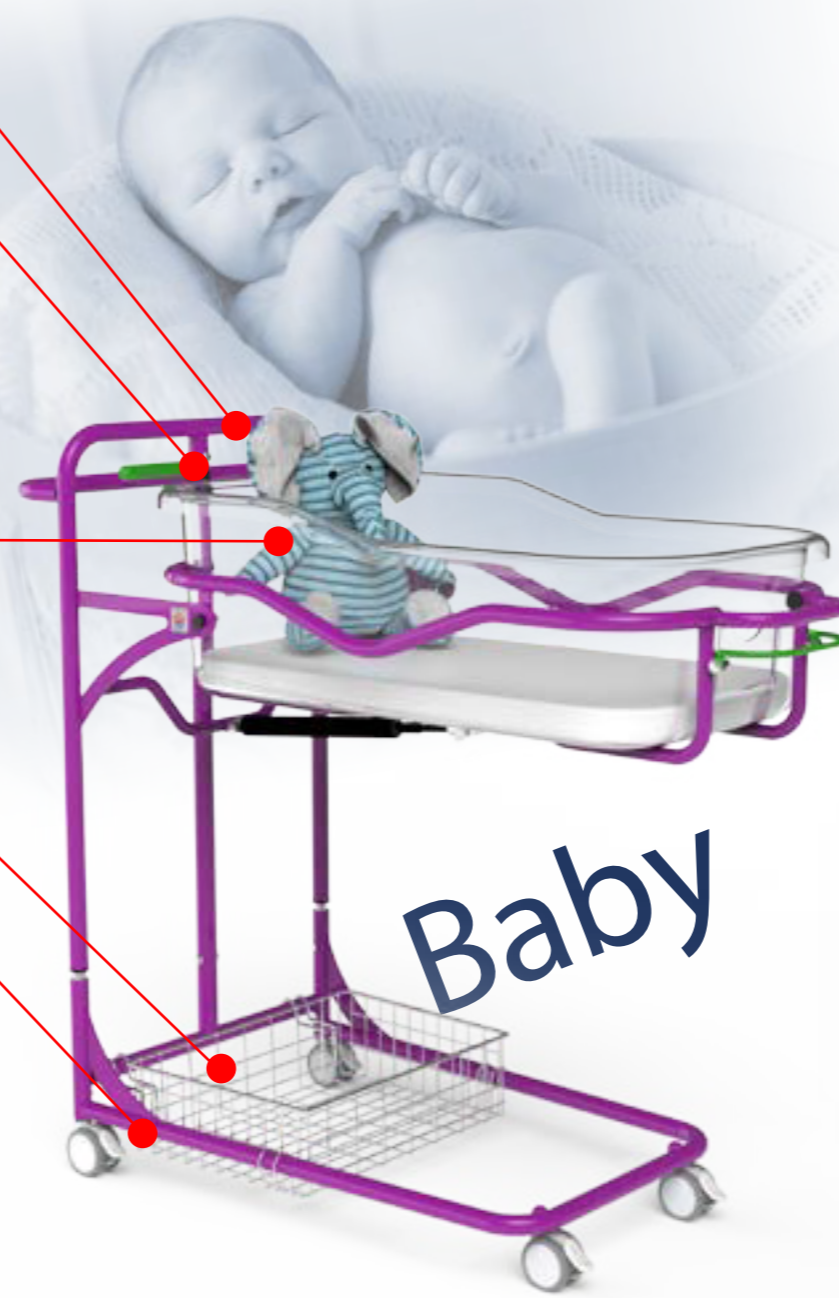

Veselá kolečka s motivy zvířátek pro postýlky Baby



Barevné varianty vaší postýlky

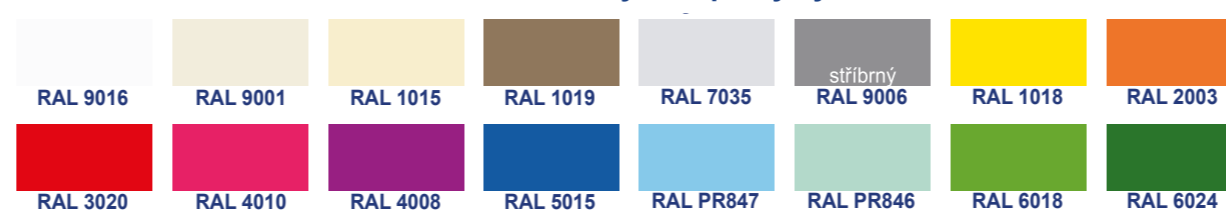

ver. 2016/01

Pozn.: Uvedené vzory barev se mohou drobně lišit od reálných odstínů.

PROMA REHA, s.r.o.
Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, Česká republika, EU
Tel.: +420 491 112 233, e-mail: info@promareha.cz

www.promareha.cz



Dětské polohovací postýlky Teddy Buddy a Baby jsou komplexním systémem pro spánek nejmenších pacientů od narození až do cca 7 let věku dítěte. Novorozenecká postýlka Baby je ideálním řešením pro zajištění nejbližšího kontaktu mezi matkou a miminkem. Konstrukce postýlky nabízí širokou škálu polohování včetně výškového nastavení, které umožňuje s postýlkou zajet nad většinu běžných lůžek. Matka tak může o své maličké pečovat přímo z lůžka. Díky průhlednému materiálu vaničky má neustále přehled o tom, co děťátko právě dělá. V čele vaničky je umístěna kapsa určena pro kartu se základními údaji o novorozenci. Postýlka je navržena pro děti do 4 měsíců. Postýlky Teddy a Buddy jsou vhodné pro hospitalizaci od nejmenších dětí až do 7 let. Využívány jsou ve standardních i specializovaných dětských odděleních nemocnic, v dětských domovech apod. Postýlky lze vyrobit v několika rozměrových variantách a v široké škále pestrobarevných odstínů. Mohou být doplněny o speciální příslušenství s bezpečnostními pojistkami pro zvýšenou ochranu malých pacientů.




Buddy



Teddy




Plynulé polohování postranic pomocí pístnice

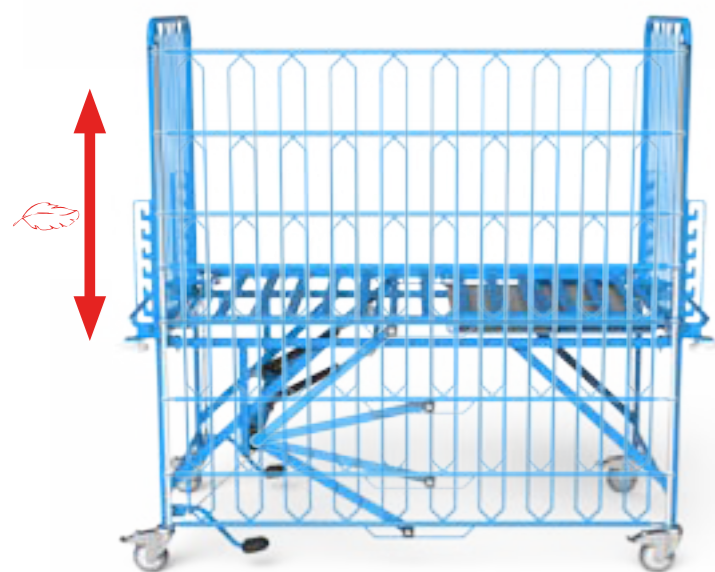

Polohování postranic mechanicky



Polohování zádového dílu

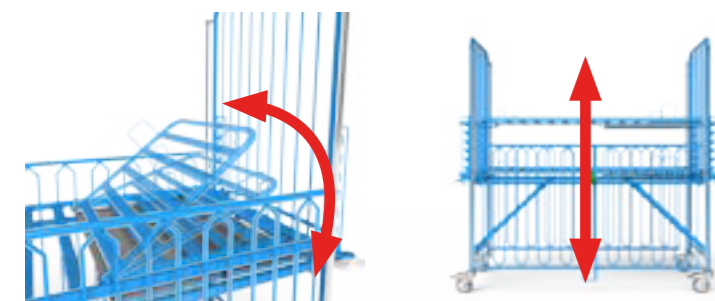

Polohování ložné plochy



VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ LOŽNÉ PLOCHY

Ložnou plochu dětské postýlky lze výškově nastavit v několika krocích. Jednotlivé strany ložné plochy je možné polohovat individuálně a dosáhnout tak speciálních poloh Trendelenburg a Antitrendelenburg.

UNIVERZÁLNÍ DRŽÁKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kompatibilita lůžka s příslušenstvím je zajištěna pomocí univerzálních držáků umístěných u hlavového, případně i nožního čela. Umožňují použití nejběžnějšího příslušenství jako jsou hračky, infuzní stojany, lampičky k lůžku nebo extenční souprava.

SNADNÝ TRANSPORT A USKLADNĚNÍ

Postýlky je možné demontovat do transportního a uložného stavu. Složené tak zabírají zlomek původní plochy a lze je tak velmi snadno převážet a skladovat.

DRŽÁKY MATRACE

Držáky zajišťují optimální polohu matrace při polohování ložné plochy a znemožňují pád matrace z lůžka.

VÝSUVNÉ POSTRANICE *Buddy*

Velikou výhodou postýlek Buddy je možnost ovládní postranic pomocí nášlapného pedálu. Postranice může být nastavena do libovolné výšky. Během polohování zůstávají obě ruce obsluhy volné. Snadné nastavení výšky bez potřeby zvýšeného úsilí zajišťují pomocné pístnice. Všechny mechanismy ovládní jsou umístěny mimo dosah pacienta. Díky tomu je zcela eliminováno riziko nežádoucího spuštění postranic.

KOLEČKA S BRZDOU

Kvalitní kolečka zdravotnických postýlek dělají transport a manipulaci s lůžkem velice snadnou. Postýlka je vybavena 3 kolečky s nášlapnou brzdou a 1 kolečkem s aretací přímého směru, které napomáhá ovladatelnosti postýlky během převozu. Kolečka jsou vyrobená ze stálého nezačernujícího materiálu. Kovové kryty koleček ulehčují čištění, chrání ložiska před nečistotami a výrazně prodlužují životnost.

BAREVNÁ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kovová konstrukce lůžka je lakovaná speciálními vysoce odolnými laky, které splňují nejpřísnější požadavky pro použití v dětských odděleních. Zákazník má možnost výběru optimální varianty z široké škály barevných odstínů.

VOLBA VELIKOSTI POSTÝLKY

Dvě varianty velikosti postýlky vám nabízí možnost zvolit si typ, který bude plně vyhovovat parametrům vašeho interiéru a zároveň poskytovat maximální komfort pro malé pacienty.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	BUDDY M-T	BUDDY L-T
Rozměry ložné plochy (Š x D)	55 x 110 cm	70 x 140 cm
Vnější rozměry postýlky	67 x 137 x 155 cm	82 x 167 x 155 cm
Výška ložné plochy	74 - 106 cm	74 - 106 cm
Náklon ložné plochy	15° / 15°	12° / 12°
Zdvih ložné plochy	✓	✓
Polohování zádového dílu	✓	✓
Náklon ložné plochy	✓	✓
Polohování postranic	pístnice	pístnice
Výška postranic nad ložnou plochou	72 cm	72 cm
Doporučený maximální věk dítěte	7 let	7 let
Bezpečné provozní zatížení	80 kg	80 kg
Kolečka	100 mm	100 mm

Pozn.: Technické parametry platí pro výše uvedené varianty. Technické parametry se mohou měnit v závislosti na konfiguraci výrobku.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

K postýlce je možné objednat speciální sadu příslušenství. Toto příslušenství je vždy vybaveno bezpečnostní pojistkou, která zabraňuje nechtěnému vytažení dítětem či samovolnému vypaďnutí. Riziko úrazu je tak zcela minimalizováno i v případě, že je malý pacient velice aktivní.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČÍ

Při vývoji postýlek řady Buddy a Teddy byly aplikovány nejpřísnější kritéria pro zachování nejvyššího bezpečí malých pacientů. Zvýšení postranic a čel, naprostá eliminace skřípných míst, umístění ovládacích mechanismů mimo dosah dítěte a vývoj speciálního bezpečnostního příslušenství jsou pouze dílčí aplikovaná ochranná opatření.

POLOHOVÁNÍ ZÁDOVÉHO DÍLU

Optimální pozici zádového dílu snadno nastavíte v několika krocích pomocí polohovacího hřebene. Ložná plocha obsahuje bezpečnostní prvky, které chrání nejmenší pacienty před pádem z lůžka i v případě maximálně zvednutého zádového dílu.

NÁRAZOVÁ KOLEČKA

V rozích postýlky jsou umístěna otočná nárazová kolečka, která chrání postýlku i okolní předměty před nežádoucím poškozením při manipulaci a transportu.

Teddy VÝSUVNÉ POSTRANICE

Postranice postýlky Teddy můžete snadno nastavit do 5 výškových poloh. Během polohování postranice směrem vzhůru dochází v jednotlivých polohách k automatické aretaci. Ovládní postranic je umístěno mimo dosah pacienta a vybaveno pojistkou proti nechtěnému uvolnění. Díky tomu je zcela eliminováno riziko nežádoucího spuštění postranic.



TECHNICKÉ PARAMETRY

	TEDDY M-T	TEDDY L-T
Rozměry ložné plochy (Š x D)	55 x 110 cm	70 x 140 cm
Vnější rozměry postýlky	67 x 137 x 155 cm	82 x 167 x 155 cm
Výška ložné plochy	74 - 106 cm	74 - 106 cm
Náklon ložné plochy	15° / 15°	12° / 12°
Zdvih ložné plochy	✓	✓
Polohování zádového dílu	✓	✓
Náklon ložné plochy	✓	✓
Polohování postranic	mechanické	mechanické
Výška postranic nad ložnou plochou	72 cm	72 cm
Doporučený maximální věk dítěte	7 let	7 let
Bezpečné provozní zatížení	80 kg	80 kg
Kolečka	100 mm	100 mm

Pozn.: Technické parametry platí pro výše uvedené varianty. Technické parametry se mohou měnit v závislosti na konfiguraci výrobku.