

JECH

Bezpečná cesta k Vašemu pohodlí



GAVOTA

křeslo, které o Vás pečuje

křeslo, které o Vás pečuje

POSKYTUJE

- POHODLÍ
- ODPOČINEK
- POLOHOVATELNOST
- VELKOU VARIABILITU
- VYNIKAJÍCÍ OPORU TĚLA
- JISTOTU A BEZPEČNOST
- JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
- SNADNOU ÚDRŽBU

Křeslo GAVOTA je vynikajícím druhem sedacího nábytku, který usnadňuje život osobám se sníženou pohyblivostí. Bylo speciálně vyvinuto pro použití v domovech důchodců, v nemocnicích, v domovech s pečovatelskou službou nebo denních stacionářích. Je skvělým pomocníkem při paliativní péči. Navíc díky preciznímu způsobu zpracování a kvalitním použitým materiálům výborně ladí k domácímu interiéru. Křeslo GAVOTA je řešeno jako modulární systém, pomocí kterého lze křeslo naprosto přesně konfigurovat Vaším potřebám. Další široká nabídka příslušenství činí z GAVOTY jedinečného pomocníka, který spojuje odpočinek a relaxaci s vynikající funkcí.

Plně polohovatelné křeslo s klasickým opěrákem doplněné podhlavníkem a čalouněním područek

Použité materiály PUR pěny jsou nehořlavé a splňují britskou normu BS 5852 (Crib 5)

BS5852

Opěrák Classic

Kulovité rukojeti pro snazší vstávání

Ergonomická polohovatelná podnožka podpora dolní části nohou polohovatelná a polstrovaná

Výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou podpírá nohy přepravované osoby, usnadňuje nastupování a vystupování, poskytuje přirozenou aretaci proti samovolnému pohybu křesla



Ochranný prvek plastová kolečka sloužící jako ochrana proti poškození interiéru i křesla

Madlo pro vedení křesla umožňuje manipulaci s křeslem a polohování opěradla obsluhou

Čalouněné područky zaručují pohodlí, jsou lehce odnímatelné a pratelné

Masivní dřevěná konstrukce pevná konstrukce s širokou nabídkou moření

Ovládání polohování sedícím oboustranné ovládání polohy opěradla a podnožky

Ochranný prvek plastových koleček slouží jako ochrana proti poškození interiéru

Systém páteho směrového kola usnadňuje jízdu se zatíženým křeslem v přímém směru

ERGONOMIE PRO ODPOČINEK

- Ergonomické opěradlo poskytuje relaxaci a příjemný odpočinek. Navíc s možností doplnění o výškově nastavitelný podhlavník.
- Plynová pružina poskytuje jednoduché a snadné polohování opěradla křesla současně s podnožkou pod dolní část nohou.
- Design opěradla zajišťuje celkovou stabilitu pacienta na křesle. Nastavitelný sedák umožňuje změnu hloubky sedu.
- Ovládání křesla je možné z místa sedící osoby pomocí ovládacích pák pod područkami nebo z pozice ošetřujícího personálu pomocí ovládacího madla na zadní straně opěradla křesla.
- Ergonomické zpracování područek usnadňuje vstávání.

VARIABILITA A PRAKTIČNOST

- Křeslo GAVOTA je nabízené v mnoha variantách potahových látek a druhů koženek. Praktičnost a variabilita odstínů umožňuje křeslo přizpůsobit libovolnému interiéru.
- Potahové látky byly vybrány s ohledem na maximální komfort včetně jejich dobré a snadné údržby.
- Potahy sedáku, opěradla a područek jsou snímatelné a lehce pratelné.
- Pod látkovým snímatelným potahem sedáku a podnožky je křeslo vybaveno ochranným čalouněním z omyvatelné koženky.
- Křeslo je vybaveno distanční mezerou mezi sedákem a opěradlem zabraňující jejich vzájemnému znečištění.

JEŠTĚ SNADNĚJŠÍ MANIPULACE

- Křeslo může být vybaveno kolečky s brzdou. Kolečka ø75 mm a 125 mm mají zvýšenou odolnost a jsou otočná i kolem svislé osy. Křeslo je výborně manipulovatelné i ve stísněných prostorách.
- Křeslo se 4 kolečky ø75 mm a 125 mm je vybaveno pátým směrovým kolem, které při zatížení křesla sedící osobou skvěle usnadňuje manipulaci, otáčení a pojištění.
- Pomocná výsuvná stupačka pro podporu nohou poskytuje nejen komfort sedícímu, ale umožňuje i zcela bezpečné vstávání z křesla. Díky promyšlené konstrukci dojde při došlápnutí na tuto nožní výsuvnou desku k zabrzdění křesla a je zcela vyloučen jeho samovolný pohyb.
- Křeslo vybavené předními koly ø300 mm bezpečně zvládne přejezd drobných nerovností a přemístění křesla i se sedící osobou na rovné a zpevněné exteriéry.

INDIVIDUÁLNÍ KONFIGURACE

Široká nabídka konstrukčních prvků a doplňkového příslušenství umožňuje vyrobit křeslo GAVOTA na míru každému uživateli. Opěrák typu CLASSIC, zvláště doplněný speciálním podhlavníkem, poskytne výbornou oporu těla ve všech polohách. Opěrák typu COMFORT nabízí relaxaci s prvky bazální stimulace, pocit bezpečí a domácí pohody.

TYPY OPĚRADEL

CLASSIC



COMFORT



TYPY PODRUČEK

Pevná dřevěná područka má kvalitní povrchovou úpravu pro snadnou údržbu. Může být doplněna čalouněnými područkami pro ještě větší pohodlí. Nové modely područek jsou pratelné včetně speciálních výplní. Výškově stavitelná područka umožňuje méně pohyblivým uživatelům komfortní přemístění z křesla a na křeslo a je možné ji nastavit do pěti poloh.

PEVNÁ (TYP P)



VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ (TYP V)



Pět poloh výškového nastavení.



GAVOTA A1-0-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku.
- Křeslo s pevným opěrákem typu Classic.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA B1-1-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku.
- Křeslo s polohovatelným opěrákem typu Classic od sedící osoby.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA C1-1-P, C1-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (C1-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (C1-2-P).
- Madlo pro lepší manipulaci (C1-2-P).
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA A2-0-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku.
- Křeslo s pevným opěrákem typu Comfort.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA B2-1-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku.
- Křeslo s polohovatelným opěrákem typu Comfort od sedící osoby.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA C2-1-P, C2-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (C2-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (C2-2-P).
- Madlo pro lepší manipulaci (C2-2-P).
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA D1-1-P, D1-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (D1-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (D1-2-P).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA G1-1-P, G1-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 2 otočných kolech Ø 125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (G1-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (G1-2-P).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA F1-1-P, F1-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 2 pevných kolech Ø300 mm a 2 otočných kolech Ø125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (F1-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (F1-2-P).
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA D2-1-P, D2-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (D2-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (D2-2-P).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA G2-1-P, G2-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech Ø 125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (G2-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (G2-2-P).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA F2-1-P, F2-2-P

- Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 2 pevných kolech Ø300 mm a 2 otočných kolech Ø125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (F2-1-P). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (F2-2-P).
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

*provedení z koženky nemá snímatelné čalounění



GAVOTA A1-0-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou.
- Křeslo s pevným opěrákem typu Classic.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA B1-1-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou.
- Křeslo s polohovatelným opěrákem typu Classic od sedící osoby.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA C1-1-V, C1-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (C1-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (C1-2-V).
- Madlo pro lepší manipulaci (C1-2-V).
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA A2-0-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou.
- Křeslo s pevným opěrákem typu Comfort.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA B2-1-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou.
- Křeslo s polohovatelným opěrákem typu Comfort od sedící osoby.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA C2-1-V, C2-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (C2-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (C2-2-V).
- Madlo pro lepší manipulaci (C2-2-V).
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA D1-1-V, D1-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou na 4 otočných kolech s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (D1-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (D1-2-V).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA G1-1-V, G1-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou na 4 otočných kolech Ø 125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (G1-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (G1-2-V).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA F1-1-V, F1-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 2 pevných kolech Ø300 mm a 2 otočných kolech Ø125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (F1-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (F1-2-V).
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA D2-1-V, D2-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou na 4 otočných kolech s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (D2-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (D2-2-V).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA G2-1-V, G2-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku s výškově stavitelnou područkou na 4 otočných kolech Ø 125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (G2-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (G2-2-V).
- Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajišťující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.



GAVOTA F2-1-V, F2-2-V

- Dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 2 pevných kolech Ø300 mm a 2 otočných kolech Ø125 mm s brzdou.
- Křeslo má polohovatelný opěrák typu Comfort a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (F2-1-V). Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (F2-2-V).
- Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
- Polohování zajišťuje plynová pružina.
- Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
- Madlo pro lepší manipulaci.
- Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné*.
- Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
- Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

*provedení z koženky nemá snímatelné čalounění

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Čalouněné područky P/V
snímatelné, zvyšující komfort.



Podhlavník pro verzi Classic
s boční opěrou hlavy.



Podhlavník pro verzi Comfort.



Kulovité rukojeti
pro snazší vstávání, odnímatelné.



Jídelní deska
odnímatelná se zvýšenými okraji.



Odkládací deska otočná
levé nebo pravé provedení se zvýšenými okraji.



Držák berlí
pro křesla bez kol.



Držák berlí
pro křesla s koly.



Madlo pro polohování opěradla obsluhou.
Standardní vybavení křesel C1-2, C2-2, D, F, G.



Podnožka polohovatelná
s úložným prostorem.



Držák na tiskoviny
pouze pro křesla s pevnou područkou (TYP P).



Držák sběrného sáčku na moč P/V.



Infuzní podpora ruky.



Držák infuzního stojanu a infuzní stojan.



Mezilýtkový klín.



Čalouněné područky s odkládací kapsou
pouze pro křesla s pevnou područkou (TYP P).



Boční opěry ramen
pouze pro typy C1-2, C2-2, D, F, G.



Fixační pás.



Nezávisle polohovatelná podnožka.



Ochranný pás
pouze pro typy C1-2, C2-2, D, F, G.



Fixační podložka sedícího.
Antidekubitní provedení, pouze v kožené.



Pratelny snímatelný potah
pouze látkové provedení typu Karagan T.

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Odkládací kapsa
na zadní části opěradla.



Tekutinám nepropustná vrstva
sedáku a podnožky.



Polohovatelný sedák.

ZAKONČENÍ NOHOU

Křeslo GAVOTA lze vybrat podle předpokládaného způsobu využívání. Křeslo s kolečky Ø75 mm (typ D) lze použít v interiéru na tvrdých, hladkých a pevných površích. Kolečka Ø125 mm jsou určena pro interiéru a příležitostně i exteriér, hladké pevné povrchy, koberce, dlažby, zámkové dlažby a asfaltové povrchy (typ G a F). Křeslo s kolečky Ø300 mm je možné použít pro interiéru i exteriér, hladké pevné povrchy, koberce, dlažby, zámkové dlažby a asfaltové povrchy (typ F).



Ukončení pevných nohou křesel GAVOTA (typy A, B, C) je možné doplnit omyvatelným návlakem nohy (02), patkou s filcem (03) nebo patkou bez filcu (04).



VÝPLŇOVÉ A POTAHOVÉ MATERIÁLY

- Použité materiály jsou pečlivě vybrány s ohledem na způsob využití a zátěž. Všechny materiály jsou hygienicky nezávadné.
- Jako výplňové materiály jsou použity kvalitní PUR pěny, které jsou oblíbené pro svou prodyšnost, bodovou elasticitu, dlouhou životnost a pevnost.
- Na sedácích a podnožkách křesel GAVOTA je použita koženka SANAPUR. Je to speciální materiál s vynikajícími vlastnostmi a hydrofobním protiplišňovým, antibakteriálním, omyvatelným a paropropustným efektem. Je omyvatelný, nehořlavý, lze jej prát do 95°C a dezinfikovat. Sanapur má z lícové strany přirozenou antifungální (protiplišňovou) odolnost úpravy a dostačující přirozenou účinnost antibakteriální úpravy.
- Na opěráku je použit separační materiál, který je prodyšný a umožňuje snadné snímání potahu.
- Čalounění křesla je možné zvolit omyvatelné – koženka nebo textilní pratelné, možno i s teflonovou úpravou.
- U potahových materiálů je kladen důraz na odolnost, pevnost a snadnou údržbu. Textilní potahy jsou snímatelné.
- Ve zdravotnictví a tam, kde je kladen velký důraz na hygienu je možné použít speciální koženku Vinytol 612 N HYG. Tento materiál vyhovuje požadavkům Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb. Odolává působení slin a potu, neobsahuje ftaláty a je čistitelný 60% lihem a přípravky bez rozpouštědel. Koženka je nehořlavá, antibakteriální, protiplišňová a vhodná pro děti do tří let.
- Pro pacienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů je možné zvolit antidekubitní provedení křesla.

DEKUBITY

Dekubity neboli proleženiny jsou špatně se hojící různě hluboké otevřené rány, které mohou vznikat u osob, které nejsou schopné se samostatně hýbat a měnit tak působení tlakových sil, zpravidla u starších pacientů s celkově zhoršeným zdravotním stavem. Příčinou vzniku proleženin je více a vzájemně se kombinují. Nejvýznamnější je tření a přímý tlak působící na kůži stlačené mezi podložkou a kostmi. Dlouhodobě působící tlak vede k stlačení cév v postiženém okrsku kůže a tím zhoršuje zásobení tkáně živinami a kyslíkem. Kůže a pak i hlouběji uložené tkáně začnou postupně odumírat. Ke vzniku dekubitů přispívá i zvýšená vlhkost kůže (např. pocení) a nedostatečná hygiena. První stádia dekubitů mohou vznikat již během několika hodin.

U dekubitů je nejdůležitější prevence. Ta spočívá v eliminaci příčin vzniku proleženin, tj. v pravidelném polohování osoby, její dostatečné výživě, zajištění co nejlepší hygieny a použití speciálních antidekubitálních pomůcek u rizikových osob.

ANTIDEKUBITNÍ PROVEDENÍ KŘESLA GAVOTA

Na antidekubitní provedení křesla GAVOTA je použita Visco pěna s paměťovým efektem. Tato pěna byla vynalezena americkou NASA. Výrobky s línou pěnou jsou pro svojí špičkovou tvárnost a minimální bodový tlak obzvláště vhodné pro osoby trpící nemocemi páteře a mají antidekubitní účinky proti proleženinám. Minimalizace bodového tlaku na predilekčních místech je znásobena speciálním profilováním. Profilovaná Visco pěna se plně přizpůsobí tvaru těla a rovnoměrně rozloží zatížení.

Toto provedení je za příplatek, viz ceník.

POŽÁRNÍ ODOLNOST / NEHOŘLAVOST

Použité materiály splňují vysokou třídu nehořlavosti BS 5852 CRIB 5. Je to nejpřísnější všeobecně uznávaná anglická norma pro hodnocení požární odolnosti čalouněného nábytku. Tuto normu musí splňovat polyuretanové pěny, které jsou použity ve výrobcích určené do veřejných prostor, do míst se zvýšenou koncentrací osob, do nemocnic apod.

BS5852

VÝBAVA KŘESEL GAVOTA


GAVOTA	základní výbava křesla									označení typu dle konstrukce a typu opěráku					
	Pevný opěrák	Polohovatelný opěrák sedícím	Polohovatelná podnožka sedícím	Polohovatelný opěrák obsluhou	Polohovatelná podnožka obsluhou	Kolečka s brzdou 4x Ø 75	Kolečka s brzdou 4x Ø 125	Kolečka s brzdou 2x Ø 300 + 2x Ø 125	Směrové kolo s pružinou 1x	Stupáčka s protiskluzovou vrstvou	Madlo pro vedení křesla	Pevná područka + opěrák Classic	Pevná područka + opěrák Comfort	Výškově stavitelná područka + opěrák Classic	Výškově stavitelná područka + opěrák Comfort
GAVOTA A	•											A1-0-P	A2-0-P	A1-0-V	A2-0-V
GAVOTA B		•										B1-1-P	B2-1-P	B1-1-V	B2-1-V
GAVOTA C		•	•									C1-1-P	C2-1-P	C1-1-V	C2-1-V
GAVOTA C s polohováním obsluhou		•	•	•	•						•	C1-2-P	C2-2-P	C1-2-V	C2-2-V
GAVOTA D		•	•			•			•	•	•	D1-1-P	D2-1-P	D1-1-V	D2-1-V
GAVOTA D s polohováním obsluhou		•	•	•	•	•			•	•	•	D1-2-P	D2-2-P	D1-2-V	D2-2-V
GAVOTA F		•	•					•		•	•	F1-1-P	F2-1-P	F1-1-V	F2-1-V
GAVOTA F s polohováním obsluhou		•	•	•	•			•		•	•	F1-2-P	F2-2-P	F1-2-V	F2-2-V
GAVOTA G		•	•			•			•	•	•	G1-1-P	G2-1-P	G1-1-V	G2-1-V
GAVOTA G s polohováním obsluhou		•	•	•	•	•			•	•	•	G1-2-P	G2-2-P	G1-2-V	G2-2-V

ZNAČENÍ KŘESEL

	vybavení	typ opěráku		polohování opěráku		konstrukce područky
GAVOTA	D	1	-	2	-	P
	A, B, C, D, F, G	1 = classic 2 = comfort		0 = bez polohování 1 = sedící osobou 2 = sedící osobou + obsluhou zezadu		P = pevná područka V = výškově stavitelná područka

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ:	A	B	C	D	F	G	podnožka
Šířka křesla	700	700	700	700	760	800	530
Výška křesla	980 – 1140 mm dle polohy opěráku						480
Hloubka křesla	780	780	780	780	950	860	410
Výška sedáku	470 mm						430
Materiál kostry	masivní buk, kov						buk
Orientační hmotnost	18 kg	19 kg	20 kg	22 kg	29 kg	29 kg	5,6 kg
Průměr koleček (mm)	-	-	-	4 x 75 1 x 100	2 x 300 2 x 125	4 x 125 1 x 100	-
Materiál čalounění	PUR pěna (nehořlavá dle normy BS 5852 – CRIB 5), syntetické rouno, SANAPUR						
Maximální hmotnost osoby	150 kg						

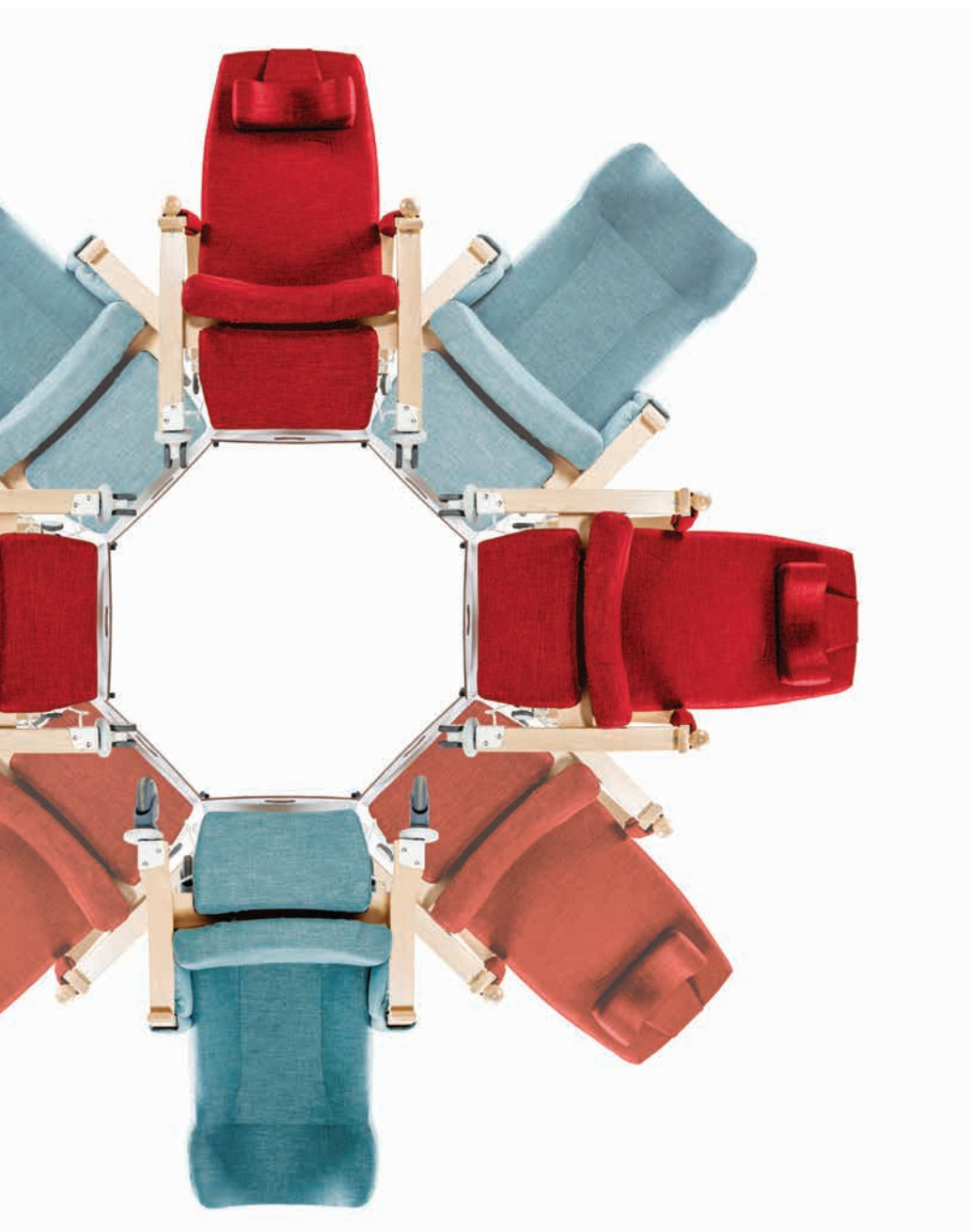

Distribútor pre SR:

SLOVCARE s.r.o.

Sladovnícka 5, 917 01 Trnava

Tel.: 0911 444 755, 0915 477 877

E-mail: info@slovcare.sk

Web.: www.slovcare.sk



slovcare